

## **Pectoralis-Implantate**

Silikongel gefüllte Pectoralis-Implantate  
verfügbar in anatomisch ovalen Formen für  
den linken und rechten Pectoralis-Muskel



Pectoralis links



Pectoralis rechts

Implants made by POLYTECH – Quality made in Germany

# Pektoralis-Implantate, CE 0483

## Produktbeschreibung

Silikongelgefüllte Pektoralisimplantate stehen als anatomisch oval geformte Implantate mit POLYtxt® texturierter Hüllenoberfläche zur Verfügung. Sie werden zur Augmentation und Wiederherstellung bei Weichteildefekten eingesetzt. Auf Anfrage erhalten Sie die Pektoralis-Implantate auch mit glatter Oberfläche.

Die Implantate sind mit einem hoch vernetzten Silikongel gefüllt, das durch seine festere Konsistenz der Umgebung der Pektoralis-Region entspricht. Zur leichteren Einführung ist medial eine Lasche angebracht. Pektoralisimplantate sind Einkammerimplantate und in drei verschiedenen Größen für den linken und rechten Pektoralis-Muskel erhältlich.

## Materialangaben

Die Hülle der Pektoralis-Implantate besteht, ähnlich wie bei Gluteus-Implantaten, aus einem stark belastbaren, hochelastischen, texturierten Silikonelastomer mit Barrierschicht, welches mit hochvernetztem Silikongel gefüllt ist.

Die Produktion der Implantate basiert auf einem Qualitätsmanagement nach DIN ISO 9001 und DIN ISO 13485. Alle verwendeten Materialien sind von implantierbarer medizinischer Qualität.

## Anwendungshinweis

Pektoralis-Implantate werden sowohl für die ästhetische Chirurgie als auch für die Rekonstruktion eingesetzt. Der Zugang erfolgt in der Regel axillär, der Patient liegt in Rückenlage mit den Armen in 90°-Stellung, um den Muskel anzuheben. Die Implantateinlage erfolgt häufig submuskulär.


## Indikationen

- Augmentation
- Konturkorrektur
- Rekonstruktion, z.B. nach Trauma
- Poland-Syndrom
- Implantatwechsel


Inzision



Präparation und Einführung

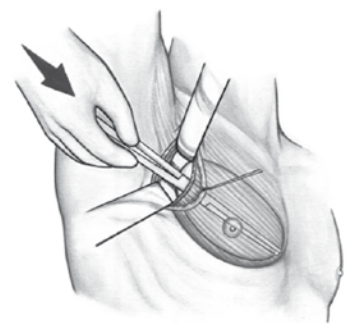


Endergebnis

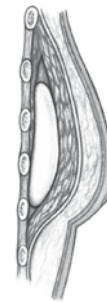

Bestellnr.	Volumen (ml)	Dimensionen (cm)		
		A	B	C

### Oval. POLYtxt®

20500-190R	192	14,7	2,4	10,2
20500-190L	192	14,7	2,4	10,2
20500-230R	231	16,0	2,7	10,7
20500-230L	231	16,0	2,7	10,7
20500-300R	301	16,9	2,9	11,6
20500-300L	301	16,9	2,9	11,6

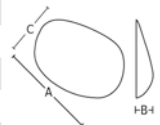

R = rechts. L = links

Maße approximativ

Auf Wunsch können auch glattwandige Pektoralisimplantate gefertigt werden. Hierzu ersetzen Sie bitte die ersten beiden Ziffern der Bestellnummer durch 10, z.B. 10500-230R.

## Wichtige Hinweise

Pektoralis-Implantate werden einzeln verpackt und steril geliefert.

**Achtung:** Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisungen, die jedem Produkt beiliegen.