



Wadenimplantate

Silikongel gefüllte Wadenimplantate
verfügbar in zwei Formen und neun Größen



Moderates Profil



Anatomisches Profil

Implants made by POLYTECH – Quality made in Germany

Wadenimplantate, CE 0483

Produktbeschreibung

Wadenimplantate stehen in einem moderaten und einem anatomischem Profil zur Augmentation und Rekonstruktion nach Weichteilverlust zur Verfügung.

Die Bereitstellung der anatomischen und moderaten Profile in drei bzw. sechs Größen ermöglicht eine ideale Anpassung im Bereich des lateralen und medialen Musculus gastrocnemius sowohl bei männlichen als auch weiblichen Patienten.

Materialangaben

Die glattwandige Hülle besteht aus einem widerstandsfähigen und hoch elastischen Silikonelastomer, das mit einer Barrierschicht ausgestattet ist. Die Implantate sind mit einem hochvernetzten Silikongel gefüllt. Dieses Silikongel entspricht durch seine festere Konsistenz den Anforderungen an die Belastungen eines Wadenimplantats.


Eine Tasche am distalen Ende des Implantats in Kombination mit der glatten Oberfläche erleichtert die Einführung und Positionierung mit Hilfe eines stumpfen Instruments.

Die Produktion der Implantate basiert auf einem Qualitätsmanagement nach DIN ISO 9001 und DIN ISO 13485. Alle verwendeten Materialien sind von implantierbarer medizinischer Qualität.

Bestellnr.	Volumen (ml)	Abmessungen (cm)		
		A	B	C

Moderates Profil

10200-012*	12	2,1	1,6	6,2
10200-030	30	3,0	1,9	10,2
10200-070	70	3,3	2,5	15,7
10200-090	90	3,2	2,3	19,5
10200-120	120	3,4	2,5	26,6
10200-140	140	4,4	2,5	26,2

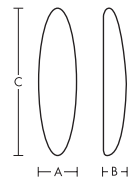


Mit einem Stern * markierte Produkte werden auf Anfrage hergestellt.

Anatomisches Profil

10201-085	85	4,7	2,4	15,1
10201-140	140	5,4	2,5	19,7
10201-180	180	5,8	2,6	23,1

Maße approximativ

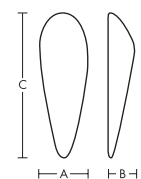

Indikationen

- Augmentation
- Konturkorrektur der Beine, z.B. bei kongenitalen Defekten
- Neurologische Erkrankungen, z.B. nach Poliomyelitis
- Aplasie und Hypoplasie
- Rekonstruktion, z.B. nach Trauma
- Implantataustausch

Wichtige Hinweise

Wadenimplantate werden einzeln verpackt und steril geliefert.

Achtung: Bitte beachten Sie die Gebrauchsinformationen, die jedem Produkt beiliegen.