

Erste und einzige FDA-zugelassene Anwendung mit CE-Zeichen!

miraDry[®]
The sweat stops here.[™]

STOPPT axilläres Schwitzen dauerhaft & sicher

- 💧 Einmalige Behandlung
- 💧 Dauerhafte Ergebnisse
- 💧 Nicht invasiv
- 💧 Schmerzfrei
- 💧 Sicheres ambulantes Verfahren
- 💧 Keine oder nur minimale Ausfallzeit



- + zur Behandlung primärer Achsel-Hyperhidrose
- + mindert unangenehme Gerüche
- + zugelassen für die Reduktion von Achselhaar



Unkomplizierter
und schneller
Behandlungsablauf



Innovative nicht invasive Technologie nutzt Mikrowellenenergie zur sicheren Beseitigung von Achselschweiß.

Mit **miraDry** schnell zu dauerhaften Ergebnissen.

Wissenschaftlich bewiesen. Klinisch geprüft. Etablierter Marktführer.

Eine dauerhafte Lösung gegen übermäßigen Achselschweiß

Für viele Menschen ist axilläre Hyperhidrose eine tägliche Belastung, die nahezu alle Bereiche ihres Lebens beeinträchtigen kann. Egal, ob Angst bei der Arbeit, Scham in der Partnerschaft und in der Öffentlichkeit oder der Zwang, Kleidung zu tragen, die den Schweiß verbirgt – übermäßiges Schwitzen kann dramatische Auswirkungen auf das Gefühlsleben und Selbstbewusstsein haben.

Jetzt gibt es eine nicht invasive Lösung, die dieses Problem dauerhaft beheben kann.



Mehr als die Hälfte der Befragten im Alter von 18 bis 64 sind an einer Behandlung mit miraDry® interessiert.



Einfache Handhabung



Handstück

Der Auslöseknopf direkt am Handstück erleichtert die Bedienung und minimiert so eine rasche Ermüdung während der Behandlung. Ein Signallämpchen leuchtet, sobald das Handstück aktiviert ist und Energie abgibt. Durch das Ansaugen der Haut werden die tieferliegenden Gewebstrukturen geschützt und es wird ein größtmöglicher Kontakt mit der hydrokeramischen Oberfläche hergestellt.

Bio Tip

Stabilisiert das Gewebe und die abgegebene Energie wird ungehindert durch den Aufsatz geleitet – steril.


Unkomplizierter und schneller Behandlungsablauf in 3 einfachen Schritten

1. Markieren



Anwendungsbereich markieren

2. Betäuben

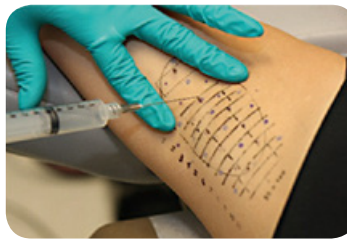

Lokalanästhetikum zur Schmerzreduktion injizieren

3. Behandeln



Anwendungsbereich mit dem miraDry® System behandeln


miraDry® ist für die Behandlung von übermässiger Achselweißproduktion (primäre Achsel-Hyperhidrose) bei Erwachsenen ab 18 Jahren indiziert.

Kontrollierte Thermolyse durch präzise gesteuerte Energie

1

Fokussierte Energiezufuhr in das Haut-Fett-Bindegewebe


- Hier befinden sich nahezu alle Schweißdrüsen

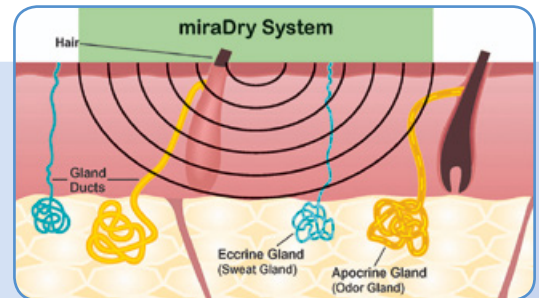

2

Die Energie wird entlang des Bindegewebes konzentriert und bildet eine fokale Energiezone


- Die Energie wird durch unterschiedliche elektromagnetische Eigenschaften des Bindegewebes reflektiert
- Die Energie wird durch entstehende Interferenzen intensiviert

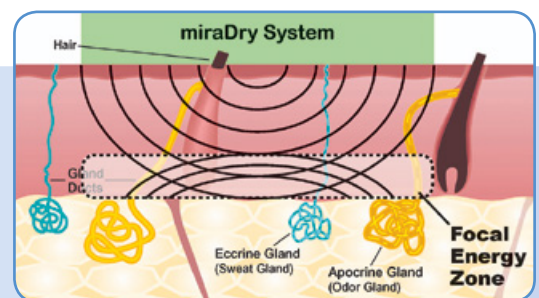

3

Das kontinuierlich hydrokeramische Kühlsystem begrenzt die Wärmezone auf den Bereich der Schweißdrüsen

- Die Zellthermolyse tritt bei 55 bis 60°C auf
- Das Ergebnis ist dauerhaft, da Schweißdrüsen sich nicht regenerieren
- Die Kühlung schützt die Epidermis und die obere Dermis

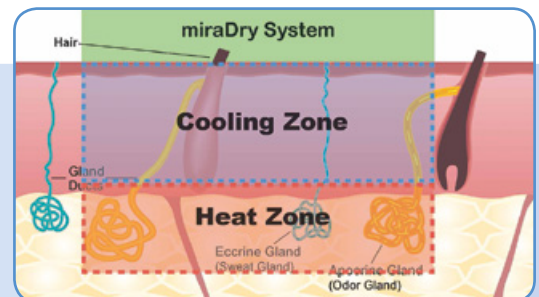

Nach der Behandlung



Nach der Behandlung ist keine oder nur eine minimale Ausfallzeit zu erwarten. Die Patienten/Patientinnen können im Normalfall direkt nach der Behandlung wieder Ihren normalen Aktivitäten nachgehen, arbeiten und üblicherweise nach einigen Tagen wieder Sport treiben. Leichte Schmerzen oder Schwellungen sind normal und klingen meist innerhalb weniger Wochen ab. Einige Patienten haben kurzzeitig ein verändertes Hautgefühl in der Achselhöhle oder an den Oberarmen, das nach und nach zurückgeht.

Dauerhafte Ergebnisse, da sich Schweißdrüsen nicht regenerieren.

In einer klinisch geprüften 2-Jahres Studie² betrug die durchschnittliche Schweißreduzierung 82 %.



Auch nach 3 Jahren anhaltende Wirkung: hier sichtbar durch den Jod-Stärke-Test³

miraDry® = miraSmooth®

Achselhaarentfernung

Einzigartige „two-in-one“ Behandlung

Stoppt übermäßige Schweißproduktion + Entfernt gleichzeitig dauerhaft Achselhaar

miraSmooth® ist die einzige nicht invasive Option zur dauerhaften Reduktion der Achselhaare, auch bei blondem und hellem Haar.

Wieso miraDry®?

- miraDry® ist das einzige von der FDA zugelassene Verfahren, das eine dauerhafte Achselschweißreduzierung auf nicht invasive Weise ermöglicht
- miraDry® ist auch zugelassen für eine Behandlung zur Reduktion von Achselhaar

- Unkompliziertes ambulantes Verfahren mit dauerhafter Wirkung
- 98 % WORTH IT Rate bei RealSelf.com⁵ (Amerikanisches Bewertungsportal)
- Über 30.000 Anwendungen durchgeführt⁴

Die optimale Behandlung für Ihre Patienten



Vor dem miraDry®-Verfahren standen nur begrenzte Optionen zur Behandlung der axillären Hyperhidrose zur Verfügung. Diese boten keine dauerhafte nicht invasive Lösung. “

Dr. William P. Coleman
New Orleans, LAwv

Technische Daten:

Mikrowellen Ausgabe-Frequenz	5.8 GHz
Kühlmittel	Integriertes Kühlsystem nutzt deionisiertes Wasser (15°C)
Vakuum	508 to 559 mm Hg
Abmessungen	119 mm H x 52 mm B x 81 mm T
Gewicht	50.8 kg
Stromversorgung	220 V / 16 A


The sweat stops here.™

Miramar Labs

1. „The ontogenesis of sweat glands is only at the embryonic period, so no sweat glands are regenerated after birth.“
Li H, Gang Z, et al. Antigen Expression of Human Eccrine Sweat Glands. J Cutan Pathol 2009; 36: 318-324.
2. Daten gespeichert bei Miramar Labs.
3. CP-0001 Feasibility Study Patient; Fotorechte: Larry Fan, MD
4. Stand: November 2014
5. Zeitraum: 12 Monate, Stand: Juni 2014.

Für mehr Informationen kontaktieren Sie:



BONDIMED Aesthetics GmbH

Office +43 7612 204 55
Mail office@bondimed.at
Web www.bondimed.at